

Kodak 1500
Cámara intraoral



El equipo de comunicación ideal

Convierta cada imagen en una excelente imagen

Enfoque automático real

Al igual que el ojo humano, la tecnología de lente líquida patentada de la cámara* enfoca automáticamente según la distancia entre la cámara y el objeto filmado, sin necesidad de realizar ajustes manuales. El resultado: captura de imagen fluida e imágenes claras y detalladas en todo momento.

La mejor resolución y rango del foco

Desde arco completo a vistas macro, la cámara Kodak 1500 proporciona la resolución más alta de imágenes fijas del mercado (1.024 x 768). Con el rango del foco más amplio del mercado (1 mm a infinito), la cámara ofrece el mayor campo de visión necesario para capturar imágenes intraorales y extraorales. Gracias al sensor y lente avanzados, los odontólogos pueden ver fácilmente detalles minúsculos, por ejemplo grietas, caries, lesiones y superficies dentales.



El sistema de iluminación LED se ajusta automáticamente a las condiciones de iluminación de su clínica.

Sistema de iluminación optimizado y autoajutable

Con su sistema de iluminación de 8 LED, la cámara Kodak 1500 proporciona una iluminación uniforme y potente. Las lámparas blancas LED de la cámara se ajustan intuitivamente a sus condiciones actuales de iluminación, y proporcionan imágenes con una iluminación óptica en cualquier entorno.



Visualice los detalles más pequeños con vistas super nítidas y colores reales.



Vista frontal.



Conductor salival dilatado.

*Aplicación de patente en archivo.

61 gramos de tecnología

Libertad inalámbrica

La cámara Kodak 1500, disponible en versiones inalámbrica y cableada, incluye tecnología Wi-Fi de vanguardia para ofrecer las soluciones más flexibles y móviles a sus necesidades de adquisición de imágenes. Con tiempos de transmisión más rápidos, mayor estabilidad y menor ruido que los dispositivos inalámbricos analógicos, la cámara Kodak 1500 ofrece una máxima fiabilidad y la misma calidad de imagen que la versión cableada tradicional.



Wi-Fi digital incorporado para una adquisición fiable y rápida, sin necesidad de cables.

Sencillez de manejo con un botón

Junto con la característica de enfoque automático, nuestro botón de captura de imagen de diseño ergonómico facilita la captura de imágenes nítidas y detalladas para todos los integrantes de su equipo. El diseño con un botón es cómodo para usuarios diestros y zurdos y también elimina la necesidad de tener un pedal, a fin de mejorar el flujo de trabajo y las condiciones de seguridad de cualquier clínica dental.

Diseño compacto pero robusto

Con la mitad de peso que otras cámaras inalámbricas, la Kodak 1500 garantiza un máximo confort para sus usuarios. El diseño del mango ligero y de fácil manejo de la cámara facilita la exploración de las zonas de más difícil acceso. No se deje engañar por su tamaño: la cámara Kodak 1500 se ha diseñado para ofrecer una máxima fiabilidad. El diseño neutro y elegante se adapta a cualquier decoración de clínica dental.



Obtenga vistas super nítidas y colores reales.



Las imágenes de alta resolución revelan los detalles más pequeños.

La forma inteligente de comunicarse

Fácil integración


El software de adquisición de imágenes dentales Kodak le permite modificar, imprimir, almacenar y gestionar fácilmente todas las imágenes que obtiene con la cámara Kodak 1500. Además, utiliza el mismo software de adquisición de imágenes dentales Kodak, por lo que la integración de la cámara en su clínica es rápida y sencilla para ahorrar tiempo y dinero. La cámara puede utilizarse con un monitor de vídeo u ordenador.

Compartir fácilmente, inversión racional

La cámara Kodak 1500 puede compartirse fácilmente entre diferentes sillones y gabinetes de exploración, lo que la onvierte en una solución económica para cualquier clínica dental.

El dispositivo de comunicación ideal

La cámara Kodak 1500, con sus imágenes precisas y reales, no sólo permite realizar un mejor diagnóstico y planificación del tratamiento, sino que ofrece también pruebas visuales claras para mostrar al paciente exactamente lo que se ve. Las imágenes nítidas y detalladas de la cámara mejoran la comunicación con el paciente y les permiten tomar decisiones más inteligentes y con mayor fundamento sobre sus opciones, por lo que hay más posibilidades de que acepten el tratamiento.

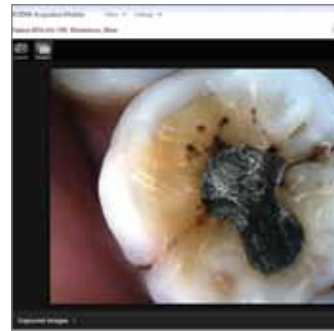

Capture la imagen con la interfaz de adquisición.



Guarde la imagen en su ordenador o tarjeta SD.



Imprima la imagen en cualquier tipo de impresora.

Redescubra la potencia de una imagen

Presentamos la cámara intraoral Kodak 1500, el equipo revolucionario que hace que la comunicación con el paciente sea más fácil que nunca. La cámara incorpora enfoque automático real y tecnología única de lente líquida que actúa como el ojo humano para garantizar una captura de imagen fluida e imágenes claras y detalladas en todo momento. Junto con la resolución de imágenes fijas más alta del mercado, la cámara ofrece una calidad de imagen excelente para mostrar los detalles más pequeños.

La cámara Kodak 1500 ofrece un nuevo nivel de capacidad de uso para los odontólogos profesionales gracias al uso de tecnología revolucionaria, que incluye características Wi-Fi opcionales y el sistema de iluminación automática. Nunca ha sido tan fácil diagnosticar, planificar el tratamiento u orientar a los pacientes a decisiones tomadas con mayor fundamento.

La cámara Kodak 1500 redescubre la potencia de una imagen.



Una cámara, dos versiones.

Disponible en configuraciones inalámbrica y cableada, la cámara Kodak 1500 está diseñada para adaptarse a su forma de trabajo. Independientemente de la versión que elija, obtendrá las mismas imágenes de alta calidad que espera de los productos dentales de Kodak.

Especificaciones técnicas

Sensor:	Micron 1/2.5" CMOS 2592 (H) x 1944 (V)
Resolución de vídeo:	640 (H) x 480 (V)
Resolución de imagen:	1024 (H) x 768 (V)
Rango del foco:	1 mm a infinito
Ángulo de visión:	90°
Campo de visión:	80°
Foco:	Enfoque automático
Fuente de luz:	Conjunto de 8 LED blancos
Salida de vídeo:	USB 2.0; TV-NTSC; TV-PAL; VGA; S-Vídeo
Conexión:	Interfaz de alta velocidad USB 2.0
Configuración multifuncional:	Soporta hasta dos grupos de diez estaciones de conexión

Accesorios inteligentes

La cámara Kodak 1500 incluye todos los accesorios que necesita para sacar el máximo provecho a su sistema: un paquete de muestra de fundas higiénicas desechables, dos baterías y un soporte de cámara. Solicite información sobre los accesorios disponibles.



La batería recargable adicional garantiza que siempre haya una batería cargada



Soporte de cámara



Pedal opcional



Fundas higiénicas desechables

¿Quiere más información?

www.carestreamdental.com

O bien póngase en contacto con su distribuidor autorizado local.

Le gustaría suscribirse a nuestro boletín informativo? Escribanos un correo electrónico a: dentalnews@carestream.com.

Kodak
Licensed Product

Carestream Dental

© Carestream Health, Inc. 2011.
La marca comercial y el logotipo de Kodak se utilizan bajo licencia de Kodak.